

NOME COMERCIAL

Fixador de Cânula Orotraqueal –
Medfix® Oro

Nº DE PROCESSO NA ANVISA

80327110002

CATEGORIA

Fixador para Cânula


VALIDADE

2 anos

APRESENTAÇÃO

Produto pronto uso. Embalado individualmente em embalagem de polietileno e então embalados em caixas de papelão contendo 25 unidades.

FOTOS DO PRODUTO

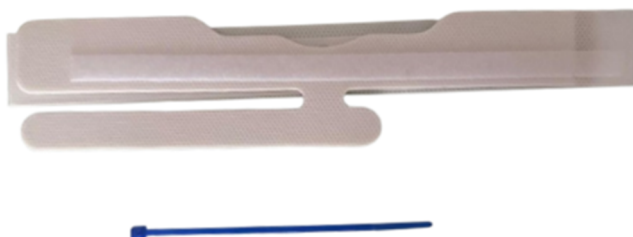

INSTRUÇÃO DE USO

1. Higienizar e retirar oleosidade da pele no local em que será aplicado o fixador.
2. Abrir a embalagem e retirar o Fixador de cânula orotraqueal – MedFix® Oro.
3. Retirar a fita de proteção do adesivo.
4. Posicionar o fixador MedFix® Oro para que fique rente ao lábio do paciente.
5. Passar cuidadosamente a fita em torno do pescoço do paciente com o cuidado para não pressionar excessivamente.

6. Passar as tiras menores do fixador de cânula orotraqueal – MedFix® Oro, em volta da cânula orotraqueal e usar a abraçadeira/velcro regulando para fixação eficaz em volta da cânula orotraqueal.
7. Trocar a cada 24h ou quando apresentar contaminação por secreção.
8. Descartar o produto após o uso.

COMPOSIÇÃO

Os fixadores de cânula orotraquel MedFix® Oro são fabricados não estéreis a uma base de plástico laminado composto de polipropileno e polietileno, espuma adesiva de polietileno, velcro de polipropileno, fita de adesivo acrílico (não contendo BPA PVC e látex), em grau medicinal, inibe a colonização bacteriana, impermeáveis, atóxicas e com uma abraçadeira plástica de nylon (cableTie) ajustável, para fixação da cânula orotraqueal. Produto sem látex.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Código	Descrição
102-240	Medfix® Oro VELCRO Pequeno
102-140	Medfix® Oro VELCRO Médio
102-040	Medfix® Oro VELCRO Grande
102-220	Medfix® Oro VELCRO Baby

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco, seco e protegido da luz solar.

ADVERTÊNCIAS

- Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente.
- Não utilizar se a embalagem tiver sido aberta ou estiver danificada.
- É proibido usar o produto após o prazo de validade.
- O produto deve ser manuseado apenas por profissionais treinados.
- O descarte deve ser realizado de acordo com os protocolos e procedimentos estabelecidos pela instituição.
- Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário.
- Verificar se o produto ficou bem fixado de modo a não causar lesões à pele.

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

FABRICANTE RESPONSÁVEL

Cirúrgica Copacabana 2000 Ltda. Reg. MS/ANVISA: 8032711

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ CEP: 20960-110

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF