

FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL



FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL

Características

Fixador para tubo endotraqueal, confeccionado em material macio e antialérgico.

Tecido na parte intermediária de PVC o que evitará a proliferação de bactérias

Fita aderente para o rosto evitando assim a extubação.

Lacre.

Embalagem individual com dados de identificação, procedência, validade e número do lote.

Manter em temperatura ambiente, em local fresco e arejado, protegido de luz.

Registro no M.S.: 80039960022

Tamanhos

Adulto - Cód: 7898931368077

Medidas (1,5 x 74,0) cm

Infantil - Cód: 7898931368145

Medidas (1,5 x 55,0) cm

FRADEL-MED IND E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Rua Tenente Américo Moretti, 579 – Vila Santa Catarina

São Paulo - SP - Brasil 04372-062

PABX: (011) 5562 3541

CNPJ: 02.916.028/0001-07 I.E: 115.341.547.116

www.fradel-med.com.br

fradelmed@terra.com.br

FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Fixador para tubo endotraqueal é confeccionado em material macio, atóxico. O fixador impede o movimento ou deslocamento do tubo.

INDICAÇÃO DE USO

O Fixador para Tubo Endotraqueal é indicado para fixar e estabilizar o tubo endotraqueal /orotraqueal na posição correta .

INSTRUÇÕES DE USO

Limpar com álcool a extremidade do tubo endotraqueal próximo ao paciente.

1.Retirar as proteções da fita hipoalergênica que serão coladas no rosto.



2.Posicionar o fixador, ajustar e prender com o VELCRO®.



FRADEL-MED IND E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Rua Tenente Américo Moretti, 579 – Vila Santa Catarina
São Paulo - SP - Brasil 04372-062

PABX: (011) 5562 3541

CNPJ: 02.916.028/0001-07 I.E:115.341.547.116

www.fradel-med.com.br

fradelmed@terra.com.br

FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL

3.Retirar a proteção da fita que será colada ao tubo.



4.Girar a fita no sentido anti-horário colando-a ao tubo.



5.Refazer o procedimento com a tira no sentido horário.



FRADEL-MED IND E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Rua Tenente Américo Moretti, 579 – Vila Santa Catarina

São Paulo - SP - Brasil 04372-062

PABX: (011) 5562 3541


CNPJ: 02.916.028/0001-07 I.E:115.341.547.116

www.fradel-med.com.br

fradelmed@terra.com.br

FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL

6. Fixar com a abraçadeira de nylon. Atenção para não prender o cordão do balonete do tubo.

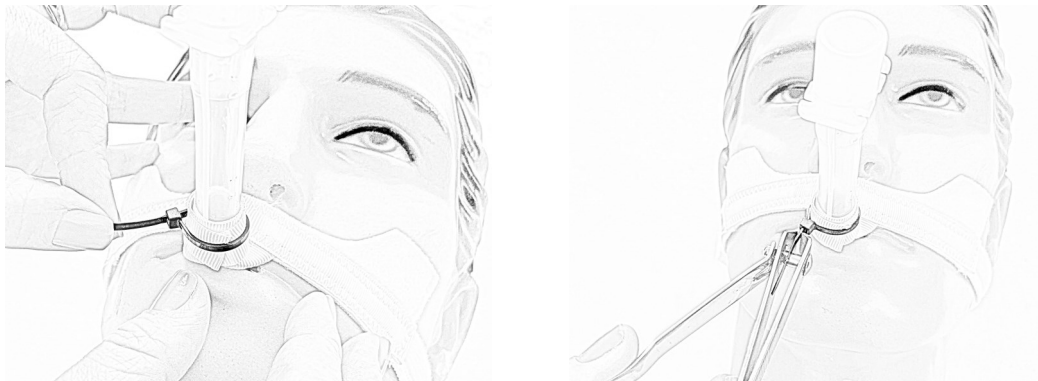

7. Para cortar a abraçadeira de nylon utilizar um alicate cirúrgico sem ponta ou cortador tipo de “unha” esterilizado.



FRADEL-MED IND E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Rua Tenente Américo Moretti, 579 – Vila Santa Catarina

São Paulo - SP - Brasil 04372-062

PABX: (011) 5562 3541

CNPJ: 02.916.028/0001-07 I.E: 115.341.547.116

www.fradel-med.com.br

fradelmed@terra.com.br

FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL / CÂNULA OROTRAQUEAL

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Mantenha o tubo endotraqueal no lugar para evitar desentubação acidental, enquanto se coloca o fixador do tubo endotraqueal.

O período de utilização do suporte depende da atividade do paciente, das secreções orais e da forma de limpeza.

A utilização de produtos de limpeza ou de desinfetantes à base de álcool na área do suporte pode provocar a separação do fixador.

Deve manter-se uma monitorização cuidadosa durante a utilização do fixador. Em caso de elevação ou separação do fixador, proceda à sua substituição

Período MÁXIMO recomendado para uso é de até 30 dias.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.



FRADEL- MED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA.

R. Tenente Américo Moretti, 579 — Vila Santa Catarina CEP 04372-062 - São Paulo - SP

PABX: (11) 5562-3541

CNPJ – 02.916.028/0001-07 – Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Eng. Francisco Fernando Felex da Silva - CREA – SP 5061003630

Reg.MS: 80039960022

Home Page: www.fradel-med.com.br - email: fradelmed@fradel-med.com.br

Validade: Indeterminada

FRADEL-MED IND E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Rua Tenente Américo Moretti, 579 – Vila Santa Catarina

São Paulo - SP - Brasil 04372-062

PABX: (011) 5562 3541

CNPJ: 02.916.028/0001-07 I.E:115.341.547.116

www.fradel-med.com.br

fradelmed@terra.com.br