

Sonda de gastrostomia

Fortune




INDICAÇÃO

Indicada para pacientes que necessitem de terapia nutricional, nos casos de: disfagias causadas por alterações peristálticas do esôfago que ocorrem nos acidentes vasculares encefálicos, doenças neurológicas, collagenoses e traumas; processos obstrutivos, como câncer de cabeça, pescoço e esôfago, pós-operatório de grande cirurgia abdominal.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricada em silicone médico transparente, radiopaca, com 18, 20, 22 e 24 Fr x 255 mm de comprimento, com balão em sua extremidade distal com volumes de 5 a 20 ml, conexão universal, disco de retenção externo, em silicone, graduado, flexível e confortável para o paciente. O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato) e BPA(Bisfenol A). O tempo de permanência da sonda é de até no máximo 30 dias.

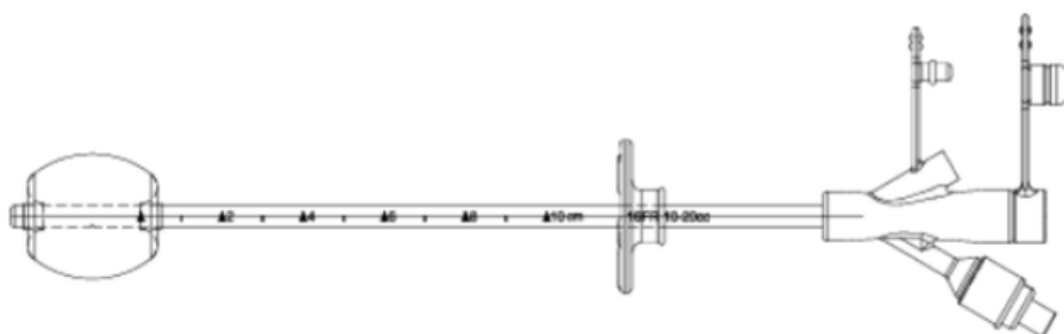

Sonda de gastrostomia

Fortune

INFORMAÇÃO, PRECAUÇÕES E RESTRIÇÕES DO PRODUTO:

- Se o pH do aspirado gástrico é igual ou menor que 5,5, a sonda está na posição correta. Se estiver acima de 5,5, a sonda não está corretamente posicionada. Sempre confirme a posição da sonda por imagem.
- Nunca ultrapasse o volume máximo do balão.
- Utilize solução salina 0.9% para preenchimento do balão.
- Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- O tempo de permanência da sonda é de até no máximo 30 dias.
- Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos de introdução e manuseio das sondas de gastrostomia para nutrição enteral.
- Evite o contato da sonda e balão com instrumentos cortantes e pinças, pois podem perfurar o produto.
- Estéril e apirogênico somente se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- Não reesterilize a sonda por qualquer método.
- Nunca administre qualquer solução através da sonda até ter certeza de seu correto posicionamento.
- Para confirmar a posição correta da sonda de nutrição enteral baixo perfil, conecte uma seringa e aspire o conteúdo gástrico.
- Não force a introdução se encontrar resistência.
- Irrigue a sonda com pelo menos 20 a 40 ml de água a cada 3-4 horas durante a nutrição contínua e antes e após a administração da dieta e medicações. Este procedimento ajudará a prevenir a obstrução da sonda.
- Confirme o volume do balão a cada 7 dias através da aspiração do volume da solução contida no balão com o volume desejado e preencha novamente o balão.
- - Não aperte demais a sonda contra a pele. Mantenha o local de implantação da sonda seco e limpo.
- Produto de uso único. Destruir após uso.
- Proibido reprocessar conforme item 59 da RE 2605/2006.
- Armazene e transporte o produto em local seco e limpo, temperatura abaixo de 32 C e umidade abaixo de 75%.

Contra-indicações:

Infecção -Sepsis, obstrução gastrointestinal, refluxo gastroesofágico severo, fistula intestinal proximal.

ANVISA nº: 10289680105

Fabricante: Fortune Medical Instrument Coop

ProMedical - 0800 707 6900