

## SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL


### FINALIDADE:

Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata-se de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes entubados em ventilação mecânica, a presença de tubo artificial impede que o paciente faça o mecanismo normal de limpeza das vias aéreas e aumenta a produção de secreções.

### COMPOSIÇÃO:

1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, cilíndrica semi-rígida.
2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda de aspiração.
3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriço sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação. Calibres de 04 ao 24FR sendo seu comprimento: 04 ao 08 - 40 cm ou 50cm, 10 ao 20 - 48cm ou 50cm. cm.
4. Dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
5. Possui a extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
6. FREE LÁTEX

### ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

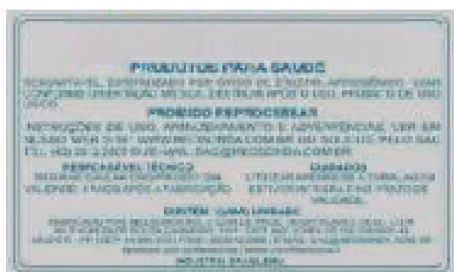

LOTE.OP: 00000      FAB/ ESTERIL: 00/00/00  
Reg. ANVISA: Vigente

### EMBALAGEM:


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

### ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

### VALIDADE:

Validade 4 anos.

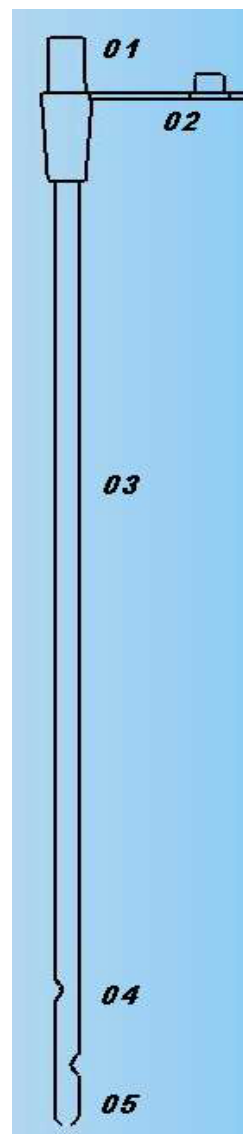

**Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Estéril: Esterilizado a óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

**Sonda Aspiração Traqueal:**

Calibres: 04 ao 24 FR;

Comprimento: 48 e 50 cm.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada;

Usar técnica asséptica quando for manusear a sonda;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

**Indicação de Uso:**

Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueal em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhos e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes intubados em ventilação mecânica, a presença de tubo artificial impede que o paciente faça o mecanismo normal de limpeza das vias aéreas e aumenta a produção de secreções.

A necessidade de aspiração é determinada pela observação visual do acúmulo de secreções e pela ausculta pulmonar para determinar a presença de secreções ou obstruções nas vias aéreas.

**Contraindicação:**

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

**Modo de Uso:**

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

Introduzir a sonda conforme técnica médica;

Atualizado por Gessica Dias Correia – Aprovado por Regiane Gavlak – Data da Aprovação 02/2022



Fornecedor autorizado:

**JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA**

Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

(41) 2108-4545

www.joaomed.com.br

## INSTRUÇÃO DE USO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

O procedimento de aspiração deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;

A sonda pode ser introduzida na traqueostomia, na boca ou nas narinas até atingir o local para retirada das secreções conforme indicação médica;

Conectar ao aspirador;

Após a aspiração das secreções, desconectar o aspirador e retirar a sonda.

Descartar o produto após o uso de acordo com a legislação vigente.

